

ZOLL AED 3® Trainer

Hjertestartertræner og tilbehør



Fuld ZOLL AED 3 simulering med HLR-feedback i realtid fra Real CPR Help

ZOLL AED 3® Trainer er den eneste hjertestartertræner som giver feedback i realtid fra Real CPR Help® om kvaliteten af hjertemassagen. Hjertestartertræneren giver mulighed for at lære den korrekte kompressionsfrekvens og -dybde ved hjertemassage i et træningsmiljø.

ZOLL AED 3 Trainer er designet til at efterligne en klinisk hjertestarter, hvilket giver en mere realistisk træningsoplevelse. ZOLL AED 3 Trainer omfatter:

- En aktiv LCD-skærm med farvebilleder af redningen, som afspejler, hvad man vil se på en klinisk ZOLL AED 3 hjertestarter
- Kontaktsensorer i træningselektroderne registrerer, når elektroden har kontakt med førstehjælpsdukken – hvilket fjerner behovet for en fjernbetjening til at understøtte simuleringen
- En pauseknop giver mulighed for at pausere træningen
- Langtidsholdbare forbrugsartikler sparer tid og penge
- Nem USB-softwareopdatering/sprogkonfiguration

Klar til 2015 AHA og ERC-retningslinjerne

Nem konfiguration: Al konfiguration og styring af træningsscenarier udføres på træningsenheden.

De konfigurerbare muligheder omfatter:

- Træningsscenarier
- Driftstilstand (halvautomatisk eller fuldautomatisk)
- Beskeder til ikke-professionel førstehjælper
- Beskeder om at tjekke vejtrækningen
- Volumenkontrol på indtalte beskeder
- Sprog (varierer iht. dansk, engelsk, norsk)


ZOLL AED 3 Trainer har alt, hvad en instruktør har brug for:

- ZOLL AED 3 Trainer
- Ledning til CPR Uni-padz® træningselektrode til ZOLL AED 3 Trainer (mindst 100 træninger)
- CPR Uni-padz træningselektrode med klæbegel og beskyttelsesplast til ZOLL AED 3 Trainer (mindst 50 træninger)
- 4 stk. D-batterier
- Betjeningsvejledning


ZOLL®



HLR-feedback i realtid med en stor tofarvet kompressionsdybdeindikator

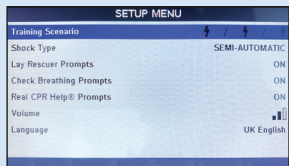

Konfigurer enhedens drifts-og træningsscenarier direkte på enheden

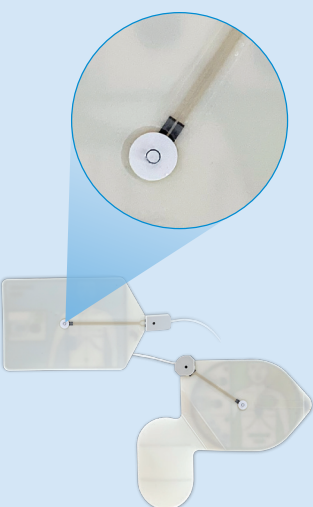

Elektrodesensorer detekterer kontakt med træningsduken, hvilket fjerner behovet for en separat fjernbetjening

Specifikationer for ZOLL AED 3 Trainer

Størrelse: (D x B x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Vægt: 1,8 kg med batterier

Strømforsyning: 4 stk. D-batterier (inkluderet) til hjertestartertræneren (holder til mere end 16 timers træning)

Træningsscenarier

Instruktører kan oprette forskellige træningsscenarier direkte på træneren vha. bløde trykknapper.




Tilbehør til ZOLL AED 3 Trainer

Ekstra tilbehør bestilles separat.



CPR Uni-padz®
træningselektrode med klæbegel
Varenr. 8028-000012 (pakke med 5)

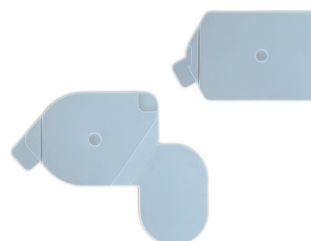

Beskyttelsesplast til CPR
Uni-padz træningselektrode
Varenr. 8028-000013



Førstehjælpsdukke
Varenr. 8000-0835-01



USB softwareopdateringssæt
til træningsenhed
Varenr. 8028-000011-XX



Ledning til CPR
Uni-padz træningselektrode
Varenr. 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, USA
+1-978-421-9655
+1-800-804-4356

Datterselskabernes adresser og faxnumre samt øvrige lokaliteter i verden findes på www.zoll.com/contacts.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL og ZOLL AED 3 er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører ZOLL Medical Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere. ZOLL AED 3 hjertestarteren sælges ikke i USA.

Trykt i USA. MCN PP 1902 0365-27

ZOLL